

 BIOCLEAR
КАТАЛОГ

ЗМІСТ

Про Bioclear	3
Набір Tooth and Surface Specific (TSS)	4-5
Система Black Triangle	6-9
360° Veneer матриці	10
HD та Original Anterior матричні системи	11
HD Anterior матрична система	12-14
Original Anterior матрична система	15-17
Evolve матрична система	18-21
Клинці Diamond	22-23
Кільця TwinRing	24
HeatSync	25-26
Blaster та аксесуари	27-28
Полірувальна система Rockstar	29-30
Інструменти	31-32
Штрипси TruContacts	33
Очищення та стерилізація	34

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕСТАВРАЦІЙНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Система Bioclear Matrix Systems є значним проривом у порівнянні з традиційною стоматологією за G.V. Black. Застосовуючи принципи структурної інженерії та передові матеріали, Bioclear допомагає стоматологам досягти здорової, функціональної та естетично красивої посмішки для своїх пацієнтів. Завдяки методу та продуктам Bioclear пацієнти отримують мінімально інвазивний підхід, що забезпечує довготривалі та естетично приємні композитні реставрації. А стоматологи, завдяки навчальному центру Bioclear, отримують індивідуальне практичне навчання в освітніх центрах по всьому світу та онлайн.

НАБІР TOOTH & SURFACE SPECIFIC (TSS)

КОД #828011

Антеріальна матрична система



Набір Bioclear TSS є кульмінацією двох десятиліть технологічних та клінічних досягнень, які змінять уявлення про щоденні антеріальні композитні реставрації. Набір TSS зосереджений на реставраціях передніх зубів у тих випадках, коли немає потреби у закритті проміжків (чорні трикутники, конічні латеральні різці та діастеми). Це перша у світі повністю анатомічна матрична система. Матриці TSS (специфічні для зуба та поверхні) містять усі складнощі будови передніх зубів, вбудовані в кожну матрицю, як-от форма цингулума, різцеві амбразури, що відповідають унікальним формам мезіальної та дистальної поверхонь різців, а також три лицьові площини верхніх різців: гінгівальна, середня та різцева третини. Наведені вище особливості та переваги можливі лише тоді, коли матриця розроблена для кожної сторони кожного різця. Система TSS розроблена для стоматологів загальної практики, дитячих стоматологів та естетичних стоматологів.

Набір Tooth & Surface Specific (TSS) Kit — це передова антеріальна матрична система, розроблена, щоб допомогти стоматологам відновлювати карієс передніх зубів з точністю та ефективністю. Її запатентована технологія перекриття з лицьового та лінгвального боків забезпечує чудову адаптацію та контур для більш природних та естетичних результатів. Набір включає матриці, специфічні для зубів №6-11 (мезіальні та дистальні), а також універсальні матриці для малих і середніх нижніх різців. Оскільки кожен зуб має унікальну форму, два розміри матриць забезпечують диференціацію та адаптивність — працюючи як розширювана форма для досягнення точної посадки. Малі та середні клинці Diamond Wedge забезпечують надійне розміщення та оптимальні контакти. Набір TSS спрощує антеріальні реставрації, зменшує час перебування пацієнта у кріслі та забезпечує стабільні естетичні результати.

Показання:

- Невеликий або великий карієс передніх зубів (Клас III)
- Випадки кругової декальцинації або крапчастої емалі
- Композитні вініри
- Прямі композитні коронки

Перегляд обов'язковий



TOOTH & SURFACE SPECIFIC ПОПОВНЕННЯ



25 ШТУК

ЗУБ	КОД
#6M	328011.25
#6D	328021.25

50 ШТУК

ЗУБ	КОД
#6M	328011.50
#6D	328021.50

ЗУБ	КОД
#7M	328031.25
#7D	328041.25

ЗУБ	КОД
#7M	328031.50
#7D	328041.50

ЗУБ	КОД
#8M	328051.25
#8D	328061.25

ЗУБ	КОД
#8M	328051.50
#8D	328061.50

ЗУБ	КОД
#9M	328071.25
#9D	328081.25

ЗУБ	КОД
#9M	328071.50
#9D	328081.50

ЗУБ	КОД
#10M	328091.25
#10D	328101.25

ЗУБ	КОД
#10M	328091.50
#10D	328101.50

ЗУБ	КОД
#11M	328111.25
#11D	328121.25

ЗУБ	КОД
#11M	328111.50
#11D	328121.50



Малі клинці (SMALL)

РОЗМІР КОД

Звичайні (Regular) #112011

Подовжені (Long) #112061



Середні клинці (MEDIUM)

РОЗМІР КОД

Звичайні (Regular) #112021

Подовжені (Long) #112071

система BLACK TRIANGLE



Tip:



BT можна використовувати для наступних процедур:

- Закриття діастеми
- Конічні латеральні різці
- Bioclear 360° вініри
- Закриття чорних трикутн.

Відскануйте щоб подивитись відео-інструкцію
<https://bioclear.live/i4j>

Система Black Triangle (BT) дозволяє швидше закривати чорні трикутники в порівнянні з оригінальними матрицями Bioclear.

Матриці BT

включають сині, зелені, жовті, рожеві



Матриці Black Triangle спеціально розроблені для закриття чорних трикутників і не потребують обрізання перед встановленням.

Вимірювач BT Gauge

код #500111



Використовується з кольоровими матрицями BT. Допомогає спростити процес вибору необхідної матриці та подальшого закриття чорних трикутників.

Розчин для виявлення


код #715091



Використовується для виявлення тріщин і біоплівки під час стоматологічної обробки. Нова біоплівка забарвлюється у рожевий колір, стара біоплівка та тріщини (старші 24 годин) — у фіолетовий, що допомагає стоматологам правильно навчати пацієнтів догляду за порожниною рота та діагностувати необхідність потрібних процедур.

система BLACK TRIANGLE

Ця система з кольоровими матрицями та вимірювальним інструментом робить вибір правильного вигину матриці для закриття гінгівальних амбразур простим і передбачуваним. Вигин матриці вказується кольорами, нанесеними зверху на матрицю, які відповідають кольорам позначок на вимірювальному інструменті, який у свою чергу вставляється у чорний трикутник та підказує, яку матрицю слід використати.

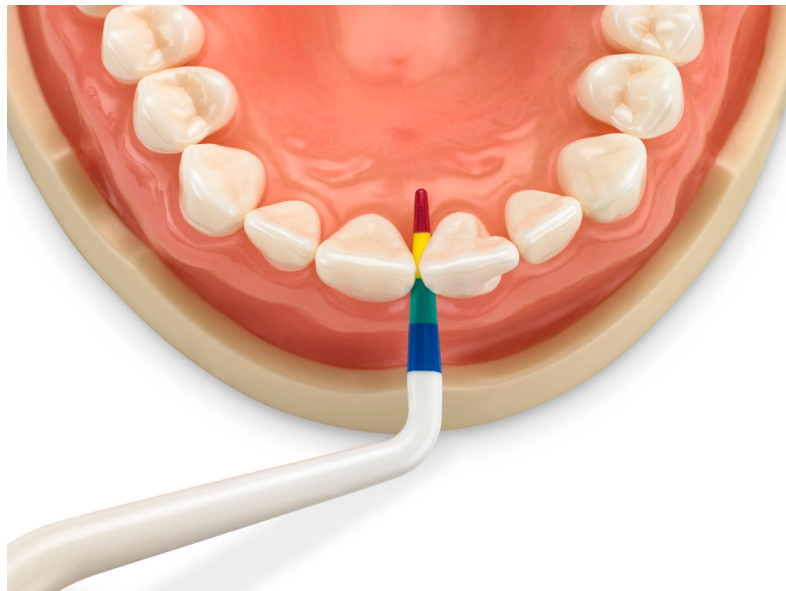

Матриці доступні у двох розмірах (для малих різців та для великих різців) і чотирьох варіантах вигину, що дозволяє працювати з усім переднім сектором зубів від ікла до ікла на верхній і нижній щелепах з естетично приємними результатами.

Малі матриці ВТ

для нижніх різців і малих верхніх латеральних різців.



Великі матриці ВТ

вищі та огортають зуб більше, ніж малі матриці. Використовуються для верхніх центральних різців, великих латеральних різців, ікол та премолярів як верхньої, так і нижньої щелепи.



система BLACK TRIANGLE

BLACK TRIANGLE KIT, набір

код #801003



Включає: матриці малі сині 10шт., малі зелені 10шт., малі жовті 10шт., малі рожеві 10шт.; вимірювач BT Gauge 1шт.; зразок продукту TrueContact; матриці великі сині 10шт., великі зелені 10 шт., великі жовті 10шт., великі рожеві 10шт.; розчин для виявлення Змл.

BT PROCEDURE KIT, набір

код #801010



Включає: матриці малі сині 3шт., малі зелені 3шт., малі жовті 3шт., малі рожеві 3шт.; вимірювач BT 1шт.; матриці великі сині 3шт., великі зелені 3шт., великі жовті 3шт., великі рожеві 3шт.

BLACK TRIANGLE

ПОПОВНЕННЯ



СИНІ

Можуть закривати простір до 2,5 мм

РОЗМІР та КОД

малі #301061

великі #301062



ЗЕЛЕНІ

Можуть закривати простір до 2 мм

РОЗМІР та КОД

малі #301071

великі #301072



ЖОВТІ

Можуть закривати простір до 1,5 мм

РОЗМІР та КОД

малі #301081

великі #301082



РОЖЕВІ

Можуть закривати простір до 1 мм

РОЗМІР та КОД

малі #301091

великі #301092

360° VENEER матриці код #317011



Bioclear 360° Veneer спеціально розроблені для створення двокомпонентної форми навколо зуба за допомогою мезіальних і дистальних матриць. Це створює форму суцільного огортання навколо зуба, герметизуючи ясенні краї і дозволяючи нагрітому композиту повністю охопити зуб вражаючи міцною, твердою, перламутровою оболонкою з композиту. Ця монолітна, міцна оболонка з гладенькою поверхнею завдяки матриці усуває властиві слабкі сторони ручного нанесення шарів композиту довільної форми або при використанні непрямих технік, що використовувалися в минулому.

HD vs ORIGINAL

антеріальні матричні системи

Антеріальні матриці Bioclear дозволяють застосовувати сучасний підхід до композитної стоматології.

Переваги антеріальних матриць Bioclear включають:

- Передбачуване відновлення або зміна профілю появи зуба;
- Форма, яка дозволяє вводити/розміщувати композит в амбразури без побоювання залишити виступаючий край;
- Гладенька поверхня матриць залишає міжзубний композит гладким і правильно профільованим;
- Форма, яка забезпечує міцну стабілізацію і повне ущільнення країв при розміщенні в сулькусі, що дозволяє легко використовувати їх без клинців при закритті невеликих проміжків з повним контактом.

HD vs ORIGINAL

жорсткість vs гнучкість
75 мкм vs 50 мкм

Різниця між цими системами полягає в гнучкості та жорсткості. Товщина Original становить 50 мкм, а HD — 75 мкм. Обидві системи, Original і HD, пропонуються в стандартних серіях А і DC.


АНТЕРІАЛЬНІ (А-серія)

Має менший профіль появи для реставрації менших проміжків.



ЗАКРИТТЯ ДІАСТЕМИ (DC-серія)

Має більший профіль появи для реставрації більших проміжків.

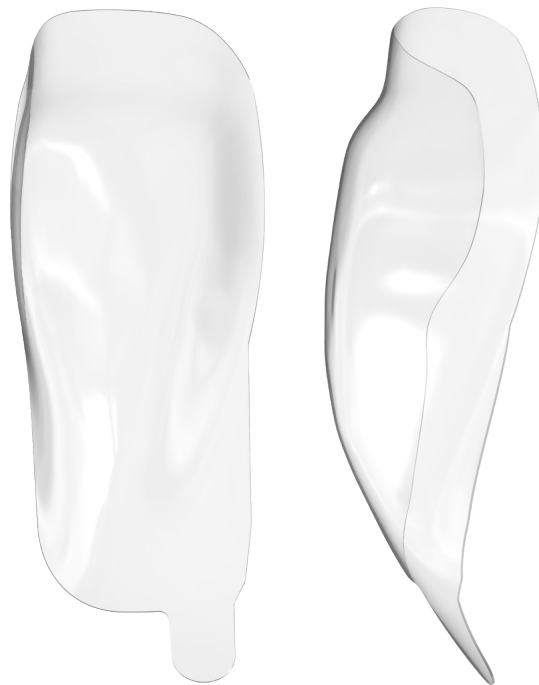

HD ANTERIOR

COMPLETE HD ANTERIOR KIT

повний набір код #820197



Включає: матриці HD A101 верхні мезіальні 15шт., HD A102 верхні дистальні 15 шт., HD A103 малі різцеві універсальні 15шт., HD A104 іклові мезіальні 15шт., HD A105 іклові дистальні 15шт., HD DC201 для закриття діастеми верхні мезіальні 15шт., HD DC202 для закриття діастеми верхні дистальні 15шт., HD DC203 для закриття діастеми малі різцеві 15шт.; клинці Diamond Wedge малі 8шт., Diamond Wedge середні 8шт.

STARTER HD ANTERIOR KIT

стартовий набір код #820196



Включає: матриці HD A101 верхні мезіальні 15шт., HD A102 верхні дистальні 15 шт., HD A103 малі різцеві універсальні 15шт., HD DC201 для закриття діастеми верхні мезіальні 15шт., HD DC202 для закриття діастеми верхні дистальні 15шт., HD DC203 для закриття діастеми малі різцеві 15шт.; клинці Diamond Wedge малі 8шт., Diamond Wedge середні 8шт.

HD ANTERIOR матриці

А-серія, форми, 75 МКМ




HD A101 - верхні мезіальні
код #320011




HD A102 - верхні дистальні
код #320021



HD A103 - малі різцеві
код #320031

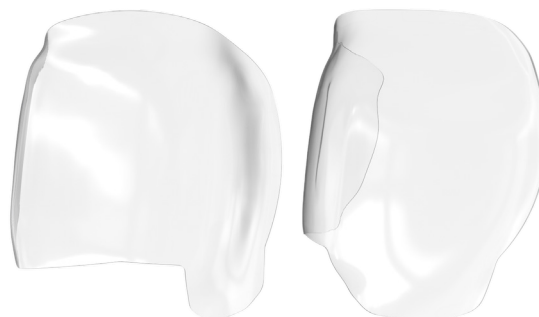

HD A104 - іклові мезіальні
код #320041

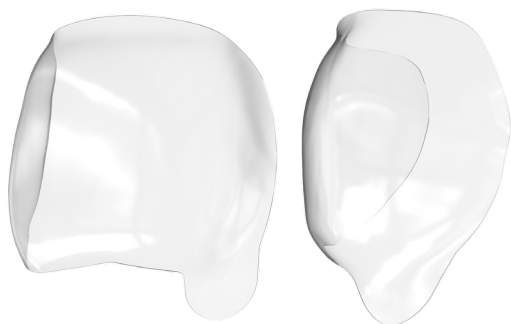

HD A105 - іклові дистальні
код #320051

HD А-серія, поповнення




HD DIASTEMA CLOSURE

матриці для закриття діастеми DC-серія, форми, 75 мкм



HD DC201 - верхні мезіальні
код #319011

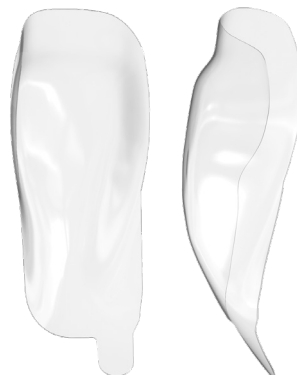

HD DC202 - верхні дистальні
код #319021



HD DC203 - малі різцеві
код #319031

HD DC-серія, поповнення



ORIGINAL ANTERIOR COMPLETE ANTERIOR KIT

повний набір код #801027



Включає: матриці A101 верхні мезіальні 15шт., A102 верхні дистальні 15 шт., A103 малі різцеві універсальні 15шт., A104 іклові мезіальні 15шт., A105 іклові дистальні 15шт., DC201 для закриття діастеми верхні мезіальні 15шт., DC202 для закриття діастеми верхні дистальні 15шт., DC203 для закриття діастеми малі різцеві 15шт.; DC204 для закриття діастеми надвеликі мезіальні 15шт.; клинці Diamond Wedge малі 16шт., Diamond Wedge середні 16шт., клинці Diamond Wedge великі 16шт., клинці Diamond Wedge надвеликі 16шт.; TrueContact червоний 1шт., TrueContact оранжевий 1шт., TrueContact синій 1шт..

ORIGINAL ANTERIOR матриці

А-серія, форми, 50 МКМ




A101 - верхні мезіальні
код #301011




A102 - верхні дистальні
код #301021



A103 - малі різцеві
код #301031

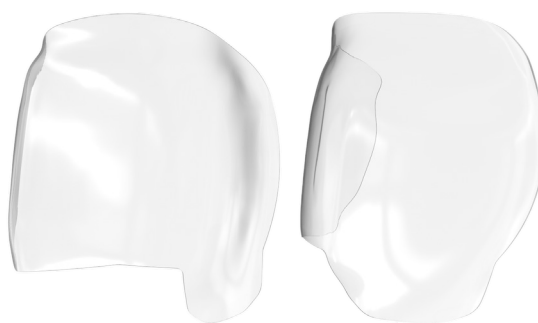

A104 - іклові мезіальні
код #301041

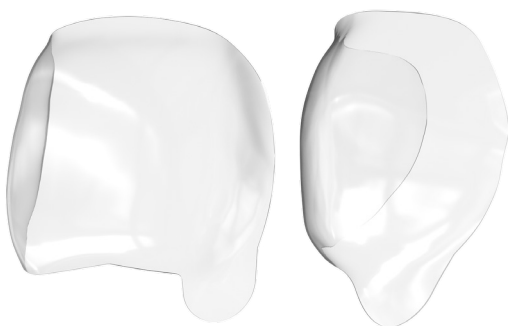

A105 - іклові дистальні
код #301051

ORIGINAL А-серія, поповнення




DIASTEMA CLOSURE MATRIX

матриці для закриття діастеми

DC-серія, форми, 50 мкм



DC201 - верхні мезіальні
код #302011

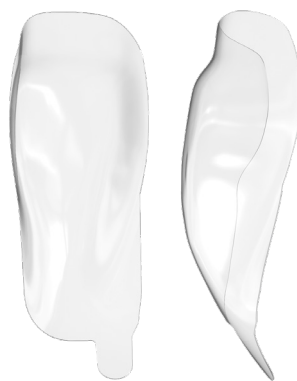

DC202 - верхні дистальні
код #302021



DC203 - мілі різцеві
код #302031



DC204 - надвеликі мезіальні
код #302041

ORIGINAL DC-серія, поповнення



EVOLVE MATRIX SYSTEM

митрична система

У продовження попереднього успіху матриць Bioclear для реставрацій молярів та премолярів, нові матриці системи Evolve використовують попередні переваги, але також мають нові переконливі покращення.

Нові особливості матриць Evolve включають:

- Чотири варіанти профілю матриць з кольоровим маркуванням кожного з них.
- Висота матриці вказана на самій матриці для швидкої ідентифікації.
- Зручні загиби на букальних та лінгвальних поверхнях для полегшеного використання.
- Великий вибір розмірів (чорна премолярна матриця доступна у розмірах 5, 6, 7, 8 і 10 мм; синя молярна — 5, 6, 7, 8 і 9 мм; оранжева молярна — 6, 7 і 9 мм; рожева молярна — 6, 7 і 9 мм.)



СИНІ МОЛЯРНІ

універсальні, підходять для багатьох випадків.




ОРАНЖЕВІ МОЛЯРНІ

ці матриці мають більш плоский профіль вигину в зоні появи ніж сині, але не на стільки плоский як рожеві.



ЧОРНІ ПРЕМОЛЯРНІ

Спеціальна форма для премолярів, ці матриці можна використовувати будь-де, де ви зазвичай використовуєте матрицю Biofit або матриці BT на премолярах.

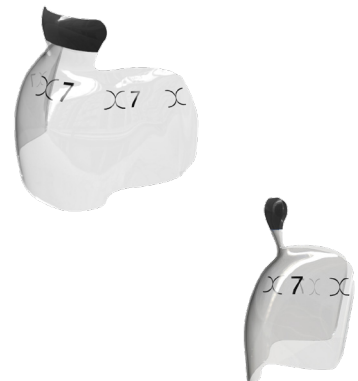

EVOLVE MATRIX SYSTEM

матриці EVOLVE MATRIX


чорні, сині, оранжеві та рожеві



Матриці Bioclear Evolve Matrices мають три різні форми появи, щоб відповідати більшій різноманітності клінічних випадків і форм зубів, що дозволяє отримати кращий контакт та менше часу витрачати на фінішну обробку поверхонь реставрації порівняно з іншими брендами матриць. Вказана висота на матриці збігається з індикатором висоти матриці Evolve, що полегшує вибір.

кільце TWINRING

код #208042

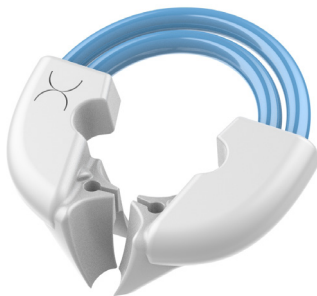

Кільце TwinRing розроблено для адаптації матриці при виконанні реставрації класу II і може використовуватися з будь-якою матрицею. Унікальний дизайн дозволяє кільцю TwinRing адаптуватися до різних типів і форм зубів; створювати сильне та рівномірне зусилля; зберігати свою початкову вихідну форму навіть після сотень повторюваних використання.

клинці DIAMOND WEDGES

малі, середні, великі, надвеликі (XL), для глибокого карієсу та фуркацій. Бувають у довгому та короткому виконанні.



Клинці Bioclear Diamond Wedges розроблено для вирішення багатьох труднощів використання традиційних жорстких клинців. Гнучкість клинців Diamond Wedge створює чудову пришийкову адаптацію та значно полегшує їх встановлення. Diamond Wedge доступні в оригінальному коротшому та подовженому виконанні для кожного розміру.

інструмент PUSH-PULL

код #500131



Push-Pull — це саморозширювальний інструмент призначений для регулювання положення встановленої матриці, для розведення або звуження постеріальних матриць Bioclear, що допоможе гарантувати щільні широкі контакти.

щипці для кілець TWINRING FORCEPS

код #500081



Щипці Bioclear TwinRing Forceps спеціально розроблені для використання з кільцями Bioclear TwinRings.

EVOLVE MATRIX HEIGHT INDICATOR (EMHI)

індикатор висоти матриць

код #500122



Індикатор потрібної висоти матриці Evolve Matrix Height Indicator (EMHI) призначений для полегшення коректного вибору матриці та полімеризації. Індикатор має два застосування: Індикатор висоти матриці: помітки вказані на індикаторі допоможуть обрати вірну матрицю Evolve з першого разу. Go/No-Go індикатор: кольоровий кінчик вкаже на те, чи можна фотополімеризувати реставрацію в один шар, або ж потрібно використати більше шарів.

EVOLVE ALL-IN-ONE KIT

все в одному, набір код #827171



Включає: матриці молярні сині 5мм - 25шт., молярні сині 6мм - 25шт., молярні сині 7мм - 10шт., молярні сині 8мм - 5шт., молярні сині 9мм - 5шт., молярні оранжеві 6мм - 10 шт., молярні оранжеві 7мм - 10 шт., молярні оранжеві 9мм - 6 шт., премолярні чорні 5мм - 25шт., премолярні чорні 6мм - 25шт., премолярні чорні 7мм - 10шт., премолярні чорні 8мм - 6шт., премолярні чорні 10мм - 6шт., клинці Diamond Wedge малі 25шт., Diamond Wedge середні 50шт., Diamond Wedge великі 25шт., Diamond Wedge надвеликі 10шт., Diamond Wedge для глибокого карієсу 10шт.; клинці Diamond Wedge Long малі 6шт., Diamond Wedge Long середні 6шт., Diamond Wedge Long великі 6шт., Diamond Wedge Long надвеликі 6шт., Diamond Wedge Long фуркальні 6шт.; кільця TwinRing універсальні 2шт.; щипці для кілець TwinRing Forceps 1шт.; інструмент Push-Pull 1шт.; індикатор висоти матриць (EMHI) 1шт.

EVOLVE POSTERIOR MATRIX

постеріальні матриці, поповнення



чорні премолярні

Ці матриці мають форму, спеціально розроблену для премолярів.

РОЗМІР та КОД

5мм	#327211
6мм	#327221
7мм	#327231
8мм	#327241
10мм	#327261



сині молярні

Універсальні, підійдуть для багатьох випадків

РОЗМІР та КОД

5мм	#327012
6мм	#327022
7мм	#327032
8мм	#327042
9мм	#327052



оранжеві молярні

Ці матриці мають більш плоский профіль вигину в зоні

появи ніж сині

РОЗМІР та КОД

6мм	#327131
7мм	#327141
9мм	#327151

DIAMOND WEDGES клинці

Bioclear Diamond Wedge клинці вирішують багато труднощів, які виникають при використанні традиційних жорстких клинців.

Ромбовидні клинці Diamond Wedges потребують менше зусиль для встановлення у порівнянні з традиційними клинцями завдяки спеціальному ромбовидному вирізу на вістрі клинця, який складається під час вставлення. Після проходження через амбразуру клинець знову розправляється, утворюючи щільний контакт і запобігаючи його випадінню.



При цьому забезпечується сильна сепарація зубів, а гнучкість клинця сприяє чудовій пришийковій адаптації, зменшуючи кількість зайвої композитної маси та скорочуючи час, потрібний на завершальні процедури з поверхнею після її затвердіння.



Ромбовидні клинці Diamond Wedges представлені у двох варіантах: коротші клинці Original та подовжені клинці Long. Original коротші клинці призначені для більшості випадків, а подовжені клинці Long довщі на 2 мм і використовуються для роботи з широкими молярами. Зазвичай довші Long клинці застосовуються разом з оранжевими матрицями Evolve.

DIAMOND WEDGE KIT набір клинців код #812001



Включає: клинці Diamond Wedge малі - 16шт., Diamond Wedge середні - 16шт., Diamond Wedge великі - 16шт., Diamond Wedge надвеликі - 16шт., Diamond Wedge для глибокого карієсу - 16шт.

DIAMOND WEDGE клинці

поповнення



МАЛІ

КОД та РОЗМІР

звичайні клинці Original #112011

подовжені клинці Long #112061



СЕРЕДНІ

КОД та РОЗМІР

звичайні клинці Original #112021

подовжені клинці Long #112071



ВЕЛИКІ

КОД та РОЗМІР

звичайні клинці Original #112031

подовжені клинці Long #112081



НАДВЕЛИКІ (XL)

КОД та РОЗМІР

звичайні клинці Original #112041

подовжені клинці Long #112091



ДЛЯ ГЛИБОКОГО КАРІЄСУ/ФУРКАЛЬНІ

КОД та РОЗМІР

звичайні клинці Original, для глибокого карієсу #112051

подовжені клинці Long - фуркальні #112101

TWINRING UNIVERSAL кільце



TwinRing Universal кільця — це значний прогрес у дизайні та функціональності, який стане бажаним оновленням для ваших реставрацій класу II з використанням композитних матеріалів. Три переваги стануть очевидними з першого ж використання цього елегантного інструменту.

По-перше, вражає технологія запобігання зісковзуванню. TwinRing Universal міцно тримається на зубах, на яких раніше ніколи не вдалося закріпити сепаратор. Попрощайтесь з сепараторами, що злітають із зубів.

По-друге, сепараційна сила цього кільця перевищує силу інших традиційних сепараторів, але що ще важливіше — подвійні пружини з нітинолу не розтягуються з часом. Довготривала сепараційна сила значно перевершує стандартні сепаратори, забезпечуючи безцінний спокій.

По-третє, замість необхідності в окремих сепараторах для премоларів і молярів, Universal кільце має бути єдиним сепаратором, який вам знадобиться для майже всіх випадків класу II.

Унікальна конструкція дозволяє кільцям TwinRing Universal адаптуватися до різних типів і форм зубів, навіть до коротких молярів, коротких премоларів, молочних молярів, а також поверх затискачів рабердама. Геометрія кільця забезпечує сильне, рівномірне зусилля, що сприяє сепарації зубів; разом з матрицею створює міцне ущільнення не вдавлюючи матрицю в порожнину; і забезпечує формування відмінного краю infinity edge при використанні разом з матрицею Bioclear і ромбовидним клинцем Diamond Wedge. Конструкція кільця TwinRing Universal забезпечує йому чудову пам'ять форми; кільце гарантовано зберігає свою первісну форму без деформації навіть після сотень або тисяч використань, а також має феноменальне зчеплення навіть на коротких зубах.

TWINRING премолярне кільце



Призначене для сепарації премоларів з достатнім рівнем зусилля

TWINRING молярне кільце



Призначене для сепарації молярів з достатнім рівнем зусилля

HEATSYNC

Однією з п'яти основ методу Bioclear є техніка ін'єкційного формування з використанням підігрітого композиту. HeatSync — це єдиний нагрівач, розроблений з урахуванням процесу ін'єкційного формування. Нагрівач для композиту HeatSync є обов'язковим для створення композитних реставрацій методом ін'єкційного формування.

HEATSYNC

КОД #414011



HEATSYNC MINI

КОД #417013



155°F / 68°C

Завдяки великій верхній частині з анодованого алюмінію для передачі тепла, HeatSync швидко нагріває стоматологічні матеріали до оптимальної робочої температури 155°F / 68°C і самостійно підтримує її протягом усього дня.

ВЕЛИКА МІСТКІСТЬ

HeatSync має достатньо місця для всіх стоматологічних матеріалів, необхідних для реставраційних випадків.

Компонування повнорозмірного нагрівача дозволяє підігрівати два пістолети для комп'юл, два шприци та до шести додаткових комп'юл у верхній печі.

ЕРГОНОМІЧНИЙ ДИЗАЙН

Ергономічний дизайн отворів для нагрівання HeatSync гарантує, що пістолетами для комп'юл та шприцами зручно маніпулювати під час їх розміщення у пристрої та виймання з нього.

ЛЕГКЕ ОЧИЩЕННЯ

HeatSync легко чистити; знімна верхня частина для передачі тепла виготовлена з високоякісних матеріалів, які можна автоклавувати.

HEATSYNC




- Алюмінієва верхня частина для передачі тепла
- Ергономічні отвори для шприців
- Піч для комп'юл
- Ергономічні отвори для пістолетів для композиту

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ КОМПОЗИТУ HEATSYNC COMPOSITE GUN

КОД #714011



Пістолет для композиту HeatSync повністю складається з термостійких матеріалів, які не передають тепло, і тому є безпечним для використання на пацієнтах відразу після виймання з HeatSync.

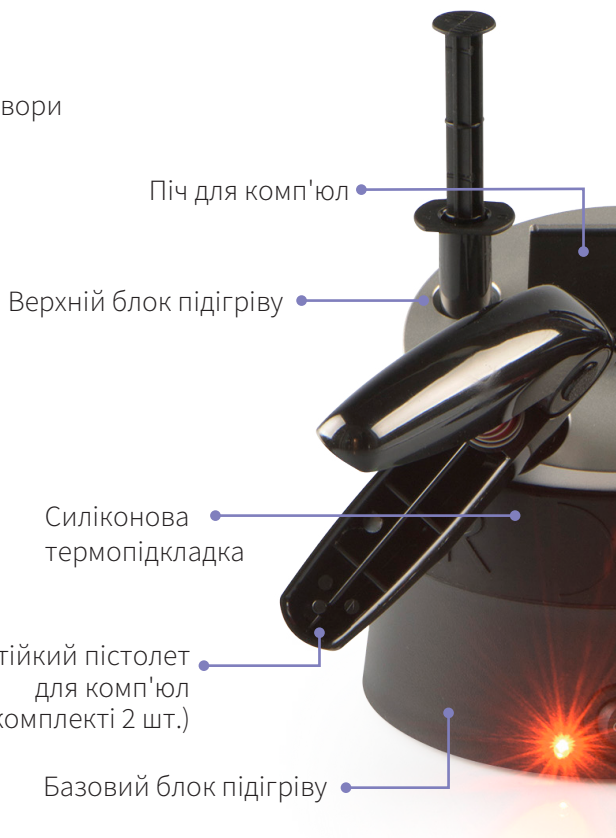

- Верхній блок підігріву
- Піч для комп'юл
- Силіконова термopідкладка
- Термостійкий пістолет для комп'юл (в комплекті 2 шт.)
- Базовий блок підігріву

ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ЗВЕРТАЙТЕСЯ
(067) 360-8228, (050)435-4290

АПАРАТ BLASTER


КОД #415011



Bioclear Blaster — це ідеальне поєднання мінімально інвазивної, але ефективної очищувальної сили, ергономічного дизайну, простоти встановлення та адаптивності. Використовуючи потужну та ефективну піскоструминну суміш тригідроксиду алюмінію, Blaster ефективно видаляє найстійкішу біоплівку, не пошкоджуючи поверхню емалі. Bioclear Blaster легко переміщати між кабінетами, він підключається безпосередньо до вашої стоматологічної установки за допомогою будь-якого поворотного з'єднання типу KaVo Multiflex. Крім того, поворотне з'єднання забезпечує повне обертання на 360°, щоб зменшити натяг шлангів і навантаження на зап'ястя!



Після застосування розчину для виявлення Bioclear Dual Color Disclosing Solution

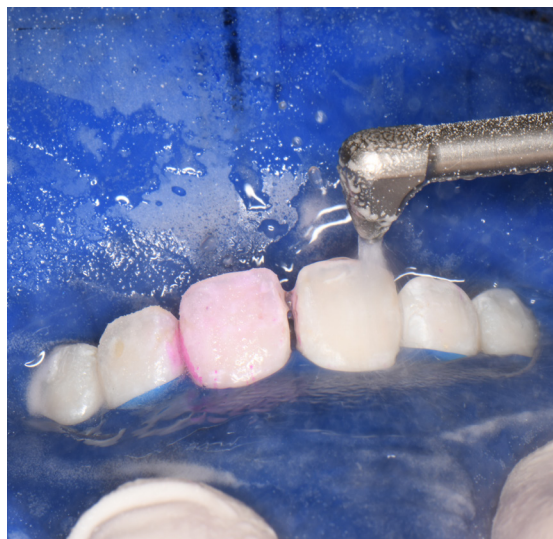

Піскоструминний апарат Bioclear Blaster під час видалення біоплівки, забарвленої розчином Bioclear Dual Color Disclosing Solution.

Клінічні зображення надані доктором Девідом Кларком (Dr. David Clark).

АКСЕСУАРИ ДЛЯ BLASTER

РОЗЧИН ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ BIOCLEAR

КОД #715091

Розчин для виявлення тріщин і біоплівки під час піскоструминної обробки. Нова біоплівка забарвлюється у рожевий колір. Стара біоплівка та тріщини (більше 24 годин) — у фіолетовий, що допомагає стоматологам правильно навчати пацієнтів догляду за порожниною рота та діагностувати необхідність потрібних реставраційних процедур.

Кожна пляшечка містить 59 мл розчину для виявлення.



ПІСКОСТРУМИННИЙ ПОРОШОК BIOCLEAR

КОД #715031

Порошок тригідроксиду алюмінію для використання з апаратом Bioclear Blaster. Цей порошок достатньо м'який, щоб не пошкоджувати структуру зуба, але достатньо твердий, щоб повністю видаляти біоплівку. Кожна пляшечка містить 6 унцій (прибл. 170 г) піскоструминного порошку.



ЗМІННА НАСАДКА ДЛЯ BLASTER

КОД #715011

Змінна насадка для апарату Bioclear Blaster.



ШАРНІРНИЙ ПЕРЕХІДНИК

КОД #715021

Змінний шарнірний перехідник для апарату Bioclear Blaster. Це 4-канальний шарнірний перехідник без оптики, який можна підключити до будь-якої установки, сумісної з системою KaVo.



ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ЗВЕРТАЙТЕСЯ:
(067) 360-8228, (050) 435-4290

ROCKSTAR POLISH SYSTEM

НАБІР ДЛЯ ПОЛІРУВАННЯ ROCKSTAR POLISH KIT

КОД #823011



Двоетапна система полірування Rockstar Polish від Bioclear розроблена для надання вашим композитним реставраціям феноменального фінішу та блиску і є одним із чотирьох наріжних каменів Методу Bioclear (Bioclear Method).

Включає: 150 г пасти Magic Mix Paste – 100 шт. полірувальних чашечок Magic Mix Prophylaxis Cups – 10 шт. полірів RS Polishers (чашечки).



Паста Magic Mix Paste та полірувальна чашечка Magic Mix Prophylaxis Cup.



Полір RS Polisher Cup.

Клінічні зображення надані доктором Девідом Кларком (Dr. David Clark).

ROCKSTAR POLISH

КОМПОНЕНТИ

ПАСТА MAGIC MIX PASTE

КОД #700111



Перший крок полірування Rockstar Polish: цей попередній полір з подвійним абразивом згладжує краї до стану infinity edge (невидимого краю) і створює ідеальне матове покриття перед переходом до другого етапу полірування Rockstar Polish – поліра RS Polisher.

ПОЛІРУВАЛЬНІ ЧАШЕЧКИ

MAGIC MIX PROPHY CUPS

КОД #623051



Чашечки Magic Mix Prophy є частиною першого етапу відомого полірування «Rockstar Polish». Чашечки Magic Mix Prophy — це одноразові профілактичні чашечки, які використовуються з пастою для попереднього полірування Magic Mix зі смаком м'яти.

RS POLISHER - CUP

Полір - чашечка

КОД #623041



RS POLISHER - FLAME

Полір - полум'я

КОД #623031



RS Polisher є останнім етапом відомого полірування «Rockstar Polish». RS Polisher використовується після попереднього полірування з Magic Mix. При використанні з водою та сильним натисканням RS Polisher створює поверхню, подібну до майлару. Оновлена формула створює фінальний блиск швидше, ніж будь-коли раніше, не руйнуючись.

ІНСТРУМЕНТИ

ЗОНД CLARK EXPLORER

SKU #500011



Кінчики зонда Bioclear Clark Explorer жорсткі та ідеально підходять для видалення матриць.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ SCULPTING POINT

SKU #500021



Спеціальний інструмент Bioclear Sculpting Point з вузьким кінчиком використовується для адаптації матриць та створення оклюзійної анатомії.

ВИГНУТА ГЛАДИЛКА ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ CURVED SCULPTING PADDLE КОД #500031



Вигнута гладилка Bioclear Curved Sculpting Paddle призначена для адаптації матриць та моделювання композиту.

МІКРОГЕМОСТАТ MICRO HEMOSTAT

КОД #500041



Мікрогемостат Bioclear Micro Hemostat має спеціальний вузький кінчик та ідеально підходить для видалення матриць.

РУЧКА ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ SCALPEL HANDLE

КОД #500051



Ергономічна кругла ручка для скальпеля Bioclear Scalpel Handle чудово підходить для очищення від залишків композиту.

ВИГНУТІ МІКРОПІНЦЕТИ CURVED MICRO PLIERS КОД #500061



Вигнуті мікропінцети Bioclear Curved Micro Pliers використовуються для встановлення та адаптації матриць як в антеріальних, так і в постеріальних реставраціях.

ІНСТРУМЕНТИ

НОЖИЦІ ДЛЯ МАТРИЦЬ

код #500071



Ножиці для матриць Bioclear гострі та невеликі, ідеально підходять для підрізання матриць.

ЩИПЦІ ДЛЯ КІЛЕЦЬ

код #500081



Щипці для кілець Bioclear Twin Ring Forceps спеціально розроблені для використання з кільцями Bioclear Twin Rings.

ІНСТРУМЕНТ PUSH-PULL

код #500132



Push-Pull — це саморозширювальний інструмент призначений для регулювання положення встановленої матриці, для розведення або звуження постеріальних матриць Bioclear, що допоможе гарантувати щільні широкі контакти.

ВИМІРЮВАЧ BT GAUGE

код #500111



Використовується з кольоровими матрицями BT. Допомогає спростити процес вибору необхідної матриці та подальшого закриття чорних трикутників.

ІНДИКАТОР ВИСОТИ МАТРИЦЬ (ЕМНІ)

код #500122



Індикатор потрібної висоти матриці Evolve Matrix Height Indicator (EMHI) призначений для полегшення коректного вибору матриці та полімеризації.

Індикатор має два застосування:

1. Індикатор висоти матриці: помітки вказані на індикаторі допоможуть обрати вірну матрицю Evolve з першого разу.
2. Go/No-Go індикатор: кольоровий кінчик вкаже на те, чи можна фотополімеризувати реставрацію в один шар, або ж потрібно використати більше шарів.

TRUCONTACT штрипси



Оптимізація контактів є важливою частиною методу Bioclear. Природні контакти зазвичай занадто щільні та міцні, щоб можна було легко вставити пластикову матрицю.

пилочки та штрипси Bioclear TruContact призначені для послідовної роботи з метою полегшення контакту, що покращує зручність розміщення матриць. Додатковою перевагою TruContact є видалення біоплівки з контакту.

TRUCONTACT сині
код #613031



Пилочка для розриву контактів

TRUCONTACT оранжеві
код #613021



Одностороння шліфувальна штрипса

TRUCONTACT червоні
код #613011



Двостороння шліфувальна штрипса

Очищення та стерилізація*

Система ВТ та продукти TrueContact (лише для багаторазових елементів)

Мийте їх з милом і водою, використовуючи м'яку щітку для видалення залишків. Стерилізуйте тільки в парових стерилізаторах на звичайному циклі.

- НЕ використовуйте спреї або вологі серветки, це може пошкодити вимірювач ВТ Gauge.
- температура стерилізатора НЕ повинна перевищувати 270°F/132°C.

Інструменти PUSH-PULL

Очищення

- Ретельно промийте інструменти після використання, щоб уникнути висихання і затвердіння залишків.
- Для видалення залишків матеріалів використовуйте м'яку щітку і м'який засіб (наприклад, рідину для миття посуду).

Стерилізація

- Після очищення стерилізуйте інструменти тільки в паровому автоклаві.
- Стерилізатор повинен бути налаштований на 270°F/132°C і 30.46 psi/210 kPa на 6 хвилин з часом сушіння 20-30 хвилин.
- Температура не повинна перевищувати 278.6°F/137°C.

Кільця TWINRINGS та щипці для кілець

Очищення

Промийте будь-які забруднення з кільця Twin Ring. Використовуйте теплу воду і м'яку нейлонову щітку для ніжного миття кільця, а потім сполосніть його в теплій воді. НЕ використовуйте спиртові серветки або інші методи холодної стерилізації – це зменшить термін служби.

Автоматична мийна дезінфекційна машина

Кільця також можна використовувати повторно, очищаючи їх у мийній дезінфекційній машині. Використовувати слід тільки належним чином обслуговувані, калібровані та затверджені мийні дезінфекційні машини згідно з ISO 15883-1. Розміщуйте інструменти в мийній дезінфекційній машині так, щоб вода та миючий засіб могли проникати та стікати з отворів пристрою. Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації мийної дезінфекційної машини. Запустіть програму мийної машини з A0 значенням ≥ 3000 (наприклад, 5 хвилин при $\geq 90^\circ\text{C}$) з використанням відповідних миючих засобів. Інструменти можна обробляти в мийній дезінфекційній машині до 500 разів.

Стерилізація

Щоб забезпечити належну стерилізацію, всі інструменти повинні бути автоклавовані парою при температурі 134°C/273°F щонайменше 3 хвилини. Кільця не повинні залишатися в автоклаві на тривалий час, оскільки це може призвести до утворення плям від самого автоклава. Будь ласка, зверніть увагу: НЕ використовуйте хімічну стерилізацію або ультразвукові методи очищення. Інші методи стерилізації, крім пари, НЕ рекомендуються Bioclear Matrix, і якщо вони використовуються, це виключно на відповідальність користувача.

Після стерилізації

Дайте інструментам повністю висохнути перед зберіганням. Щипці для кілець не потребують подальшого догляду і не повинні змащуватись.

***Ці рекомендації щодо очищення та стерилізації стосуються лише багаторазових елементів систем та продуктів Bioclear. Засоби та елементи систем продуктів Bioclear, що мають одноразове використання, повинні бути утилізовані згідно місцевих норм та правил утилізації для подібних типів продуктів.**

BIOCLEAR

(050) 435-4290

(067) 360-8228

www.aitas.com.ua

@aitasplus

aitasplus1@gmail.com



наш сайт